



ХОРИЗОНТАЛНА СИТОВА МАШИНА AS 400 CONTROL

The RETSCH AS 400 control is used for sieving dry goods with test sieves up to 400 mm in diameter. The uniform, horizontal circular sieving motion produces a sharp separation of the sample fractions. Fine and coarse-grained goods from areas such as milling, brewing, chemical industry, quarries, soil testing, woodworking and plastics industry, can be exactly separated with the AS 400 control. This particular sieving motion is preferably used for long or fibrous, needle-shaped or flat materials due to their horizontal orientation. For the testing of plastics (grainy molding materials), the standard DIN 53 477 stipulates exactly this circular sieving motion.

The AS 400 control can be used as test instrument for the quality control according to DIN EN ISO 9001. Due to the controlled drive which is independent of the power frequency the AS 400 control yields reproducible results worldwide. The speed and sieving time are set, displayed and monitored digitally. The instrument is supplied with a test certificate and can be recalibrated. If desired, the rotation direction can be set to alternate in the interval. A memory for 9 sieving programs facilitates routine analyses. The AS 400 control has an integrated interface for controlling all sieving parameters via the EasySieve® software.



ACCURACY & EFFICIENCY

- | Circular sieving motion according to DIN 53477
- | For sieves up to (Ø) 400 mm
- | Measuring range 45 µm to 63 mm
- | Easy operation, ergonomic design
- | Free digital selection of process parameters (time, speed, interval)
- | Memory for 9 Standard Operating Procedures (SOPs)
- | Test materials monitoring according to DIN EN ISO 9001

ХОРИЗОНТАЛНА СИТОВА МАШИНА AS 400 CONTROL

АКСЕСОАРИ И ОПЦИИ

Ситовите шейкъри от контролната серия могат да бъдат оборудвани с разнообразни аксесоари, за да осигурят множество изисквания за приложение.



Затягащи устройства

Със затягащите устройства RETSCH ситата се захващат безопасно, бързо и удобно на сито. Затягащите устройства „комфорт“ са особено лесни за ползване и спестяват време.

Аксесоари за сита

Съдове за събиране, междинни тигани, междинни пръстени и капаци на ситото

Пресяващи помощни средства

Верижни пръстени, четки, кубчета, топки (например за

IQ/OQ Documents

We provide IQ/OQ documentation for the „control“ sieve shakers to support IQ/OQ certification by our customers.

Делители на проби

Значими резултати могат да бъдат получени само ако пробата представлява оригиналния материал. Разделителите на проби произвеждат представителни частични проби, като по този начин осигуряват възпроизводимостта на анализа.

Ultrasonic baths and dryers


Suitable for thorough cleaning of test sieves and for quick, gentle drying of samples and sieves.

намаляване на агломерациите
при пресяване на частици <100
µm и поддържане на мрежата
свободна).

RETSCH TEST SIEVES AND ACCESSORIES - ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE

EASYSIEVE / EASYSIEVE CFR СОФТУЕР ЗА ОЦЕНКА


EasySieve, the software for particle size analyses, exceeds manual evaluation in many aspects. The software is able to automatically control the necessary measurement and weighing procedures – from the registration of the weight of the sieve up to the evaluation of the data. It is simple and convenient to use and is also available in an FDA 21 CFR Part 11-conform version.

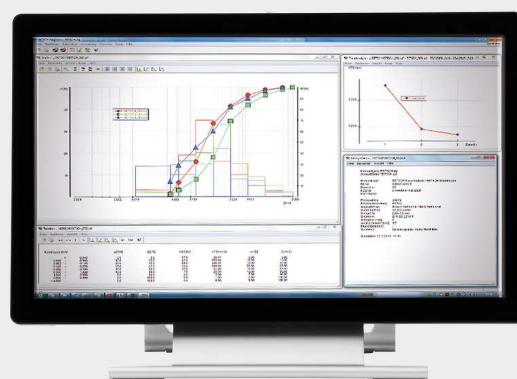

ХОРИЗОНТАЛНА СИТОВА МАШИНА AS 400 CONTROL

ТИПИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОБА


RETSCH's Analytical Sieve Shaker AS 400 control is ideally suited for separation, fractioning, particle size determination of construction materials, ground corn, plastics, sand, splints

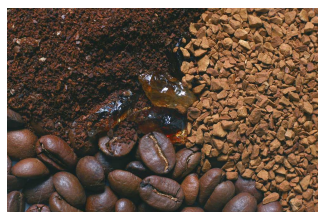

кафе



дървесни стърготини

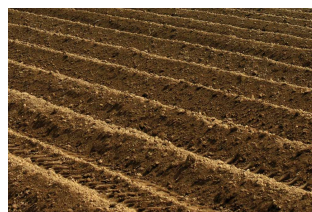

почва



зърнени храни

To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Основната плоча на AS 400 control извършва хоризонтални кръгови движения с радиус 15 мм (според DIN 53477). Електронно контролирана скорост от 50 до 300 оборота в минута, с възможност за непрекъснато регулиране. На дисплей се изобразяват актуалните обороти на основната плоча. Машината се задвижва от здрав 125 Ватов мотор, без нужда от поддръжка. Мощността се предава чрез ексцентрик.



ХОРИЗОНТАЛНА СИТОВА МАШИНА AS 400 CONTROL

TECHNICAL DATA

Приложения	разделяне, фракциониране, определянето на размера на частиците
Област на приложение	биология, геология / металургия, инженеринг / електроника, медицина / фармация, околната среда / рециклиране, селското стопанство, строителни материали, стъкло / керамика, химия / пластмаси, храна
Материали	прахове, насипни материали
Обхват на измерване*	45 микрона - 63 мм
Пресяващо движение	хоризонтално кръгово движение
Макс. капацитет	5 кг
Макс. брой на фракциите	7 / 9 / 17
Макс. тегло на стека сита	15 кг
Настройване на скоростта	дигитално, 50 - 300 об./мин.
Дисплей за времето на пресяване	дигитално, 1 - 99 мин.
прекъсната работа	1 - 10 мин.
Запаметяване на настройки	9
Подходящ за сухо пресяване	да
Подходящ за мокро пресяване	не
Връзка с компютър	да
Включват сертификат / може да бъдат калибрирани	да
Диаметри на ситата	100 mm / 200 mm / 203 mm (8") / 305 mm / 315 mm / 400 mm
Макс. височина на стека сита	510 mm
Захващащи устройства	standard, "comfort", each for dry sieving
Защита	IP 20
Данни за електрозахранването	100-240 V, 50/60 Hz
Захранване	еднофазово
Ш x В x Д	540 x 260 x 507 мм
Нетно тегло	~ 70 кг
Стандарти	CE

в зависимост от захранващият материал и настройките на инструмента

www.retsch.com/as400control

ДАННИ ПОРЪЧКА

HORIZONTAL SIEVE SHAKER AS 400 CONTROL

Horizontal Sieve Shaker AS 400 control for test sieves up to 400 mm Ø
(please order clamping device, test sieves and collecting pan separately)

30.022.0001



AS 400 control

100–240 V, 50/60 Hz

incl. test report acc. to EN
10204 2.2

CLAMPING DEVICES AS 400 CONTROL

32.662.0010



Clamping device "standard", for test sieves 400 mm Ø

32.662.0011



Clamping device "comfort", for test sieves 400 mm Ø

SIEVE STACKS AND ACCESSORIES AS 400 CONTROL

60.166.000999

Sieve stack consisting of 6 test sieves (ISO 3310-1), 400 mm Ø, 65 mm height
(500 µm, 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm) and collecting pan

60.167.000999

Sieve stack consisting of 6 test sieves (ASTM E11), 400 mm Ø, 65 mm height
(35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 4 mesh, 3/8", 3/4") and collecting pan

ACCESSORIES AS 400 CONTROL

03.802.0006



Transportation handles AS 400

99.200.0026

IQ/OQ Documentation for AS 400 control

ACCESSORIES FOR CLAMPING DEVICES AS 200, AS 300, AS 400

CLAMPING LIDS

32.481.0022



Clamping lid with large window of Perspex for test sieves 200/203 mm Ø

02.660.0012



Clamping lid with large window of Perspex for test sieves 400 mm Ø

CLAMPING ELEMENTS

32.142.0001		Clamping nuts, (2 pieces) for clamping device "standard"
32.737.0001		Quick-clamping elements, (2 pieces) for clamping device "comfort" AS 200/300/400
05.114.0080		O-ring for quick-clamping element for AS 300 and AS 400, 1 piece

CLAMPING RODS

32.248.0002		Threaded rods, (2 pieces) for clamping device "standard"
32.248.0001		Threaded rods, short, (2 pieces) for clamping of max. 5 test sieves for clamping device "standard"
32.742.0010		Rods, smooth, (2 pieces) for clamping device "comfort" AS 300/400

SIEVING AIDS

32.365.0001		Chain ring for test sieves 200 mm and 203 mm Ø to support horizontal sieving
32.050.0001		Brushes, 3 pieces
32.902.0001		Cubes of polyurethane, 12 x 12 x 12 mm, 10 pieces
32.902.0002		Cubes of polyurethane, 20 x 20 x 20 mm, 10 pieces
32.354.0001		Balls of rubber, 20 mm Ø, 5 pieces
32.354.0002		Balls of agate, 10 mm Ø, 10 pieces
32.354.0004		Balls of steatite, 6 mm Ø, 150 g

ACCESSORIES FOR TEST SIEVES (PANS, RINGS, LIDS)

FOR TEST SIEVES 400 MM Ø

60.010.000400		Collecting pan, неръждаема стомана, 400 mm Ø, height 65 mm
60.220.000400		Intermediate pan, неръждаема стомана, 400 mm Ø, height 65 mm
60.935.000400		Intermediate ring, неръждаема стомана, 400 mm Ø, height 65 mm
60.107.000400		Sieve lid, неръждаема стомана, 400 mm Ø,

TEST SIEVES Ø 400 MM - 65 MM HEIGHT - ISO 3310/1 - STAINLESS STEEL / WIRE GAUZE

	# mm	# mesh no.	Ø	height	standard
60.166.000025	25 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000032	32 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000036	36 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000038	38 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000040	40 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000045	45 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000050	50 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000053	53 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000056	56 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000063	63 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000071	71 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000075	75 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000080	80 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000090	90 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000100	100 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000106	106 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000112	112 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1

60.166.000125	125 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000140	140 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000150	150 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000160	160 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000180	180 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000200	200 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000212	212 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000224	224 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000250	250 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000280	280 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000300	300 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000315	315 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000355	355 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000400	400 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000425	425 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000450	450 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000500	500 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000560	560 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000600	600 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000630	630 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000710	710 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000800	800 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000850	850 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.000900	900 µm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001000	1.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001120	1.12 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001180	1.18 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001250	1.25 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001400	1.40 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001600	1.60 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.001700	1.70 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1

60.166.001800	1.80 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.002000	2.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.002240	2.24 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.002360	2.36 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.002500	2.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.002800	2.80 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.003150	3.15 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.003350	3.35 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.003550	3.55 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.004000	4.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.004500	4.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.004750	4.75 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.005000	5.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.005600	5.60 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.006300	6.30 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.006700	6.70 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.007100	7.10 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.008000	8.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.009000	9.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.009500	9.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.010000	10.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.011200	11.20 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.012500	12.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.013200	13.20 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.014000	14.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.016000	16.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.018000	18.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.019000	19.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.020000	20.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.022400	22.40 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.025000	25.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1

60.166.026500	26.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.028000	28.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.031500	31.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.035500	35.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.037500	37.50 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.040000	40.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.045000	45.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.050000	50.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.053000	53.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.056000	56.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.063000	63.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.071000	71.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.075000	75.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.080000	80.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.090000	90.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.100000	100.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.106000	106.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.112000	112.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1
60.166.125000	125.00 mm	-	400 mm	65 mm	ISO 3310/1