



## XRD-MILL MCCRONE

**The XRD-Mill McCrone was specially developed for the preparation of samples for subsequent X-ray diffraction (XRD). The mill is used for applications in geology, chemistry, mineralogy and materials science, quality control as well as R&D.**

Because of its unique grinding motion, the XRD-Mill McCrone is particularly effective for this analytical method: The 48 cylindrical grinding elements grind the samples gently via friction. The result is a short grinding time with almost no sample loss and an exceptionally narrow particle size distribution. Consequently, the signals in the X-ray diffraction pattern are peak-shaped, with small half-widths, allowing for very good phase analysis.

**The crystal lattice structure is largely preserved, with almost no defects, a prerequisite for meaningful X-ray diffraction patterns.**

The grinding vessel consists of a 125 ml capacity polypropylene jar fitted with a screw capped gasketless polyethylene closure. The jar is filled with an ordered array of 48 identical cylindrical grinding elements, available in agate, zirconium oxide or corundum. The grinding time for optimum micronization is between 3 and 30 minutes. A typical sample volume is between 2 and 4 ml.

For the preparation of organic samples for a subsequent XRD examination we also offer a hand mortar and pestle made of agate.



## ADVANTAGES

- | crystal lattice preserved during grinding operation
- | very narrow and reproducible particle size distribution
- | minimal cross contamination
- | compact, bench-top sized model
- | adjustable grinding power (4 steps)
- | suitable for dry and wet grinding
- | easy to clean
- | almost maintenance-free
- | quiet operation

## ПРИЛОЖЕНИЕ

шисти, бори́ди, глина, карбиди, керамика, кости, метали, нитриди, полезни изкопаеми, растителни материали, слюда, строителни материали, стъкло, цимент


To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.

## ПРИНЦИП НА РАБОТА

The XRD-Mill McCrone carries out size reduction mainly by friction. 48 cylindrical grinding elements are placed into the grinding jar in eight rows of six elements each.

During operation, the jar's circular motion causes the elements to grind the sample from  $< 0.5$  mm to the low  $\mu\text{m}$ -range (typically  $< 10$   $\mu\text{m}$ ).

Thanks to the very gentle size reduction process, the crystal lattice of the sample is preserved. This makes the XRD-Mill McCrone the instrument of choice for the sample preparation for subsequent X-ray diffraction analysis.

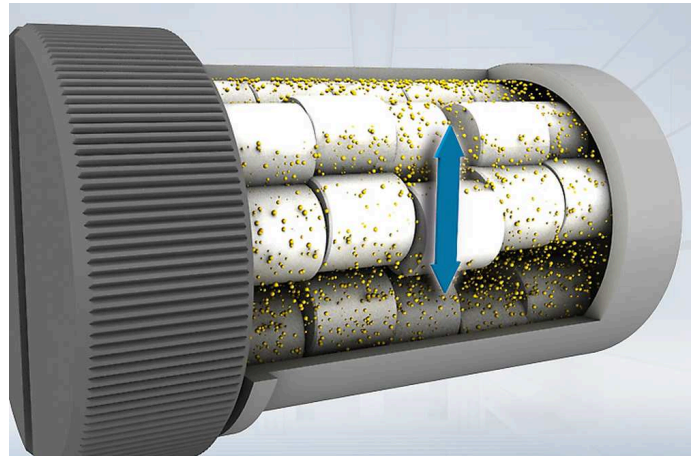

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Приложения</b>                                | смилане, смесване и пулверизиране, сухо и мокро |
| <b>Област на приложение</b>                      | X-ray diffraction                               |
| <b>Материали</b>                                 | средно твърди, твърд, крехък, влакнести         |
| <b>Максимален размер на захранващият продукт</b> | < 0.5 mm                                        |
| <b>Големина след смилане*</b>                    | < 1 µm                                          |
| <b>Скорост при 50 Херца (60 Херца)</b>           | 1,000 - 1,500 min <sup>-1</sup> in 4 steps      |
| <b>Брой на смилачните станции</b>                | 1                                               |
| <b>Най-често използвано време за смилане</b>     | 3 - 30 min                                      |
| <b>Сухо смилане</b>                              | да                                              |
| <b>Мокро смилане</b>                             | да                                              |
| <b>Криогенно смилане</b>                         | не                                              |
| <b>Материал на смилачните части</b>              | ахат, циркониев оксид, корунд                   |
| <b>Обем на смилачната камера</b>                 | 125 ml                                          |
| <b>Настройване времето за смилане</b>            | дигитално, 00:00:01 до 99:59:50                 |
| <b>Задвижване</b>                                | DC-Motor                                        |
| <b>Мощност на двигателя</b>                      | 50W                                             |
| <b>Данни за електрозахранването</b>              | 100-240 V, 50/60 Hz                             |
| <b>Захранване</b>                                | еднофазово                                      |
| <b>Защита</b>                                    | IP 30                                           |
| <b>Енергийна консумация</b>                      | 33 VA                                           |
| <b>Размери затворена</b>                         | 205 x 155 x 520 mm                              |
| <b>Нетно тегло</b>                               | ~8.9 kg                                         |
| <b>Стандарти</b>                                 | CE                                              |

\* в зависимост от захранващия материал и настройките на инструмента\*

[www.retsch.com/xrd-mill](http://www.retsch.com/xrd-mill)

## ДАННИ ПОРЪЧКА

### XRD-MILL MCCRONE

**XRD-Mill McCrone with 2 grinding jars with screw top lid of PP, 1 pouring lid, 1 loading device  
(Please order grinding elements separately)**

20.770.0001



XRD-Mill McCrone, 220-240 V, 50/60 Hz

### XRD-MILL MCCRONE COMPLETE PACKAGE

**XRD-Mill McCrone complete package incl. 2 agate grinding sets (50 grinding elements each), 2 grinding jars with screw top lid of PP, 1 pouring lid, 1 loading device**

20.770.1001



XRD-Mill McCrone, 220-240 V, 50/60 Hz complete package

### SETS OF GRINDING ELEMENTS

02.368.0123



Agate

1 set (50 grinding elements)

02.368.0122



Corundum

1 set (48 grinding elements)

02.368.0126



Zirconium oxide, 1 set (48 grinding elements)

### ACCESSORIES XRD-MILL MCCRONE

22.460.0001

Sample preparation set (stainless steel percussion mortar, 10 corundum grinding elements, 1 sieve 500 µm and 1 brush)

02.368.0124



Grinding elements, tungsten carbide, 2 pieces

### ADDITIONAL ITEMS XRD-MILL MCCRONE

01.462.0356



Grinding jar with screw top lid

03.462.0359

Screw top lid

03.462.0357



Pouring lid

03.486.0007



Loading device

22.111.0005

Gasket for grinding jar, 5 pcs.