




# SETACCIATORE AS 200 CONTROL

Worldwide comparability of results

**L'unità di misura e controllo regolata da microprocessore assicura un'altezza di vibrazione costante e consente una riproducibilità al 100% dei risultati anche tra diversi setacciatori AS 200. Una caratteristica particolare distingue questo prodotto RETSCH dagli altri: oltre che all'altezza di vibrazione, è possibile impostare l'accelerazione del setacciatore, che è indipendente dalla frequenza di alimentazione. Insieme alla possibilità di calibrazione, questo garantisce risultati di setacciatura comparabili e riproducibili in tutto il mondo. In questo modo, vengono soddisfatti tutti i requisiti per il monitoraggio dei materiali secondo la norma DIN EN ISO 9001.**

Tutti i parametri di setacciatura - altezza di vibrazione, tempo e intervallo - sono impostati, visualizzati e monitorati digitalmente, il che rende il funzionamento del setacciatore AS 200 Control molto comodo e veloce. È possibile memorizzare fino a 99 procedure operative standard (SOP) per le analisi di routine.

Attraverso l'interfaccia integrata, lo strumento può essere collegato a un PC e controllato con il software di valutazione EasySieve®. Questo programma consente all'utente di eseguire l'intero processo di setacciatura e la successiva documentazione con comodità, precisione e conformità agli standard.

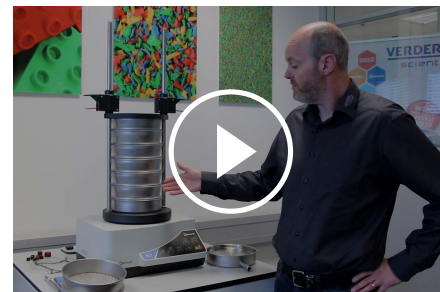

[Cliccare per visualizzare il video](#)

**Video di prodotto**

## ACCURATEZZA E EFFICIENZA

- | Setacciatura con effetto 3-D
- | Per setacci fino a (Ø) 203 mm
- | Adatto per la setacciatura a secco e a umido
- | Campo di misura da 20 µm a 25 mm
- | Memoria per 99 procedure operative standard (SOP)
- | Impostazione e controllo digitale dei parametri di setacciatura
- | Accelerazione indipendente dalla frequenza di alimentazione
- | Azionamento elettromagnetico brevettato (EP 0642844)
- | Controllo dei materiali secondo la norma DIN EN ISO 9001

### SETACCIATORE AS 200 CONTROL

## FUNZIONAMENTO SEMPLICE E SICURO

Il funzionamento di AS 200 Control è comodo e facile. Tutti i parametri di setacciatura - altezza di vibrazione, tempo, intervallo - vengono impostati, visualizzati e monitorati digitalmente. È possibile memorizzare fino a 99 combinazioni di parametri (SOP) per le analisi di routine. Attraverso l'interfaccia integrata lo strumento può essere collegato a un PC e controllato con il software di valutazione EasySieve®. Questo programma consente all'utente di controllare l'intero processo di setacciatura e la successiva documentazione con praticità e precisione.



SETACCIATORE AS 200 CONTROL

## SETACCIATURA A UMIDO CON VIBROSETACCIATORI

Esistono molte applicazioni per le quali la setacciatura a umido è la soluzione migliore, ad es. quando il materiale da testare è una sospensione o quando è necessario setacciare un campione molto fine ( $<45\ \mu\text{m}$ ) che tende ad agglomerarsi. Tutti i vibrosetacciatori di RETSCH possono essere utilizzati per la setacciatura a umido. Sono disponibili accessori speciali come coperchi di fissaggio con finestra e fondi di raccolta con uscita. Posizionando gli anelli di ventilazione di RETSCH tra i setacci, i cuscinetti d'aria possono espandersi senza lasciare fuoriuscire liquido o parte del campione.



## SETACCIATORE AS 200 CONTROL

### ACCESSORI & OPZIONI

I setacciatori della serie Control possono essere dotati di una varietà di accessori per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi.



#### | Elementi di fissaggio

Con i dispositivi di fissaggio RETSCH i setacci vengono fissati in modo sicuro, rapido e conveniente sul setacciatore. I dispositivi di bloccaggio "comfort" sono di facile e rapido utilizzo.

#### | Accessori per setacci

Fondi di raccolta, fondi intermedi, anelli intermedi e coperchi per setacci.

#### | Accessori per setacciatura a umido

Coperchi di chiusura con ugelli, fondi di raccolta con uscita, anelli di ventilazione per setacciatura a umido.

#### | Dispositivi di ausilio per setacciatura

Catenelle per setacci, spazzole, cubi, sfere (ad es. Per ridurre gli agglomerati quando si setacciano particelle <100 µm mantenendo libera la maglia).



#### | Documenti IQ/OQ

Forniamo documentazione IQ / OQ per i setacciatori della serie "Control" a supporto della certificazione IQ / OQ da parte dei nostri clienti.

#### | Ripartitori di campioni

Risultati significativi possono essere ottenuti solo se il campione rappresenta il materiale originale. I ripartitori di campioni producono campioni rappresentativi, garantendo così la riproducibilità dell'analisi.


#### | Bagnetti ad ultrasuoni e essiccatori

Adatto per la pulizia accurata dei setacci e per un'asciugatura rapida e delicata di campioni e setacci.

**RETSCH TEST SIEVES AND ACCESSORIES - ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE**

## SOFTWARE DI ELABORAZIONE EASYSIEVE / EASYSIEVE CFR


**EasySieve**, il software per l'analisi della dimensione delle particelle, supera l'analisi manuale in molti aspetti. Il software è in grado di controllare automaticamente le procedure di misurazione e pesatura necessarie - dalla registrazione del peso del vaglio fino alla valutazione dei dati. È semplice e comodo da usare ed è disponibile anche in una versione conforme alla FDA 21 CFR Part 11.

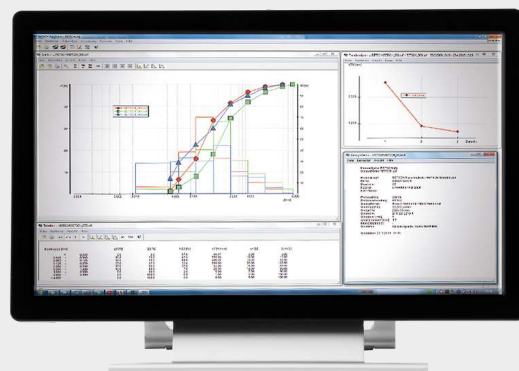


### SETACCIATORE AS 200 CONTROL

## CAMPIONI TIPICI

I vibrosetacciatori sono spesso utilizzati per l'analisi granulometrica di clinker di cemento, prodotti chimici, caffè, materiali da costruzione, fertilizzanti, farine, cereali, polveri metalliche, minerali, noci, plastica, sabbia, semi, terreni, detersivi, ecc.

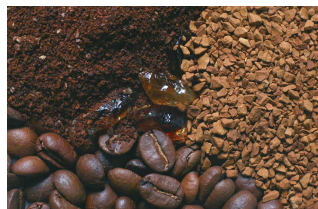

*caffè*

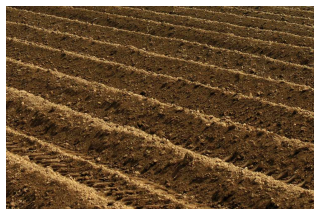

*terra*



*cereali*



[Cliccare per visualizzare  
il video](#)

*Soy beans*

Visiti il nostro database applicativo per trovare la miglior soluzione per la preparazione del suo campione


### SETACCIATORE AS 200 CONTROL

## ESEMPI APPLICATIVI

## EFFICIENT POWDER PROCESSING IN DENTAL LABORATORIES WITH THE AS 200 CONTROL

Modern dental laboratories like the Dental Laboratories Rehra in Germany use the vibratory sieve shaker AS 200 control for precise classification of metal powders from 3D printing to ensure consistently high material quality. Reliable sieving ensures that only optimally sized particles are returned to the production process, increasing process stability. Agglomerated and oversized particles are removed in advance. At the same time, efficient powder processing helps to significantly reduce material losses and lower costs.

The reproducible results of the AS 200 control support consistently high quality of dental components such as crowns and implants. Fine blasting media used for surface treatment can also be precisely classified and freed from dust and contaminants. This enables the targeted recovery and reuse of valuable blasting media, improving process consistency and reducing operating costs. A uniform particle size distribution ensures consistent and reliable blasting results.

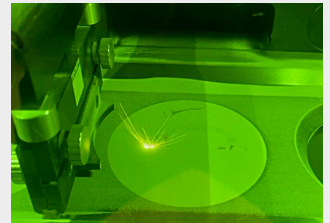


Metal lasers and 3-D manufacturing in action: Complex structures are built up layer by layer.



Model view after 3-D manufacturing



Oxide layer on a model part before sandblasting

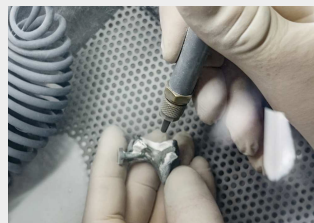

Sandblasting Process for a Model Part

## EFFICIENT SEPARATION OF STONES FROM UP TO 9 SOIL SAMPLES WITH THE AS 200 CONTROL

In soil analysis, sieving with the AS 200 control prevents distortion of analytical results, reliably separates rocks from soil samples, and simultaneously minimizes equipment damage. Users achieve time-saving and precise analytical results, while maximizing the service life of their devices.

Unbeatable Together: The AS 200 control in combination with the BB 50 jaw crusher is the proven solution for processing large agglomerates from soil samples and can handle up to nine samples in one batch.



After

**A 120 g soil sample with agglomerates up to 15 mm in diameter was processed using a 200 x 25 mm sieve with 2 mm round holes.**

## APPLICATION AT COLOGNE CATHEDRAL – OPTIMAL PROTECTION FOR HISTORICAL STONE SURFACES

The Cologne Cathedral workshop has relied on the AS 200 control for many years to precisely determine particle size distribution in mortar. Various particle fractions can be accurately separated and combined. The goal is to develop mortar with optimal structure and color that almost perfectly replicates the original stone. The use of the AS 200 control eliminates manual sorting, making mortar production more reproducible and efficient.



The result: mortar with the physical properties to fill cracks and simultaneously prevent water penetration.



**BEFORE - AFTER**

## HIGHEST FOOD QUALITY WITH THE AS 200 CONTROL

At Lebensgarten GmbH, the quality of organic cereal flakes is ensured through precise incoming goods inspections. Sieving analysis separates the flakes into different particle size fractions. Special importance is given to the dust fraction of the product with a particle size < 500 µm. This can impair the sealing of packaging on the one hand and negatively affect the consistency of crunchy products on the other.

The patented electromagnetic drive and the three-dimensional throwing motion of the AS 200 control ensure even distribution and optimal separation. Thanks to flexibly adjustable parameters such as amplitude and hole size, various types of flakes can be precisely sieved – ideal for checking raw material quality regarding dust and fine fractions and ensuring high quality in end products.



## SETACCIATORE AS 200 CONTROL

### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Tutti i setacciatori della serie AS 200 funzionano con un azionamento elettromagnetico brevettato da RETSCH (EP 0642844). Questa trasmissione produce un movimento 3D che sposta il prodotto da setacciare in modo uniforme su tutta la superficie di setacciatura. Il vantaggio: elevata capacità di sollecitazione, funzionamento estremamente regolare e tempi di setacciatura brevi con elevata efficienza di separazione.



[Cliccare per visualizzare il video](#)

## AS 200 CONTROL

### DATI TECNICI

|                                                             |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Applicazioni</b>                                         | separazione, frazionamento, analisi granulometrica                                                                                                                                        |
| <b>Campo di applicazione</b>                                | agricoltura, ambiente / riciclaggio, biologia, chimica / plastica, cibo, geologia / metallurgia, ingegneria / elettronica, materiali da costruzione, medicine / farmaci, vetro / ceramica |
| <b>Materiale in ingresso</b>                                | polveri, materiali sfusi, sospensioni                                                                                                                                                     |
| <b>Range di misura</b>                                      | 20 µm - 25 mm                                                                                                                                                                             |
| <b>Movimento del prodotto da setacciare</b>                 | movimento di lancio con momento angolare                                                                                                                                                  |
| <b>Lotto massimo / capacità di carico</b>                   | 3 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numero frazioni ottenibili (max)</b>                     | 11 / 22                                                                                                                                                                                   |
| <b>Massa pila setacci (max)</b>                             | 6 kg                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ampiezza</b>                                             | digitale, 0.20 – 3.00 mm                                                                                                                                                                  |
| <b>Ampiezza Controllata</b>                                 | si                                                                                                                                                                                        |
| <b>Accelerazione setacciatura</b>                           | 1.0 - 15.1 g                                                                                                                                                                              |
| <b>Visualizzazione tempo setacciatura</b>                   | digitale, 1 - 99 min                                                                                                                                                                      |
| <b>Intervalli di rotazione</b>                              | 1 - 99 s                                                                                                                                                                                  |
| <b>Programmi memorizzabili</b>                              | 99                                                                                                                                                                                        |
| <b>Utilizzabile per setacciature a secco</b>                | si                                                                                                                                                                                        |
| <b>Utilizzabile per setacciature ad umido</b>               | si                                                                                                                                                                                        |
| <b>Interfaccia USB</b>                                      | si                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comprendente certificato test / può essere calibrato</b> | si                                                                                                                                                                                        |
| <b>Diametri setacci utilizzabili</b>                        | 100 mm / 200 mm / 203 mm (8")                                                                                                                                                             |
| <b>Max Altezza pila di setacci</b>                          | 620 mm                                                                                                                                                                                    |
| <b>Dispositivi di chiusura</b>                              | standard, "comfort", ciascuno per setacciatura a umido e a secco                                                                                                                          |
| <b>Codice di protezione</b>                                 | IP 21                                                                                                                                                                                     |
| <b>Dati alimentazione elettrica</b>                         | 100-240 V, 50/60 Hz                                                                                                                                                                       |
| <b>Potenza connessione</b>                                  | Monofase                                                                                                                                                                                  |
| <b>W x H x D</b>                                            | 417 x 212 x 384 mm                                                                                                                                                                        |
| <b>Peso netto</b>                                           | ~ 35 kg                                                                                                                                                                                   |
| <b>Standard</b>                                             | CE                                                                                                                                                                                        |

\*in funzione del materiale e della configurazione strumentale

[www.retsch.com/as200control](http://www.retsch.com/as200control)

## ARTICOLI

### SETACCIATORE A VIBRAZIONE AS200

**Vibro setacciatore AS 200 per setacci fino a 203 mm / 8" Ø (ordinare separatamente sistema di chiusura, setacci, fondo di raccolta)**

30.032.0001



AS 200 control, 100–240 V, 50/60 Hz, incl. certificato di ispezione in accordo con EN 10204 2.2

**altre versioni elettriche disponibili allo stesso prezzo**

### SISTEMI DI CHIUSURA AS 200

**Max. numero di frazioni ottenibili, per setacci Ø**

32.662.0002



Sistema di chiusura "standard", 9 / 17, 200 / 203 mm Ø

32.662.0001



Sistema di chiusura "comfort", 9 / 17, 200 / 203 mm Ø

32.662.0005



Sistema di chiusura universale "standard", 9 / 17, 100 – 203 mm Ø

32.662.0004



Sistema di chiusura universale "comfort", 9 / 17, 100 – 203 mm Ø

32.662.0034

Sistema di bloccaggio universale "comfort", lungo, 11 / 22, 100-203 mm Ø  
(solo per AS 200 Control)

32.662.0007



Sistema di chiusura universale per setacciatura ad umido "standard", 9 / 17, 100 – 203 mm Ø

32.662.0006



Sistema di chiusura universale per setacciatura ad umido "comfort", 9 / 17, 100 – 203 mm Ø

### SET DI SETACCI ED ACCESSORI AS 200

60.131.000999



Set di setacci comprensivo di 8 setacci (ISO 3310-1), 200 mm Ø, 50 mm height (45 µm, 63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) e fondo di raccolta

60.150.000999



Set di setacci comprensivo di 8 setacci (ASTM E11), 203 mm (8") Ø, 50 mm (2") altezza (325 mesh, 230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) e fondo di raccolta

## ACCESSORI AS 200

03.243.0044  Disco di gomma per setaccio

99.200.0027 Documentazione IQ/OQ per AS 200 control

**[LL:iid.retschi.link\_test\_sieve\_range]**

## ACCESSORI PER SISTEMI DI CHIUSURA AS 200, AS 300, AS 400

### COPERCHI DI FISSAGGIO

32.481.0022  Coperchio di chiusura con larga finestra in Perspex per setacci 200/203 mm Ø

32.481.0014  Coperchio di fissaggio universale con piccola finestra per setacci 100/150/200/203 mm Ø

32.481.0015  Coperchio di fissaggio universale per setacciatura ad umido con piccola finestra per setacci 100/150/200/203 mm Ø

### ELEMENTI DI FISSAGGIO

32.142.0001  Dadi di serraggio, (2 pezzi) per il dispositivo di bloccaggio "standard"

32.737.0001  Elementi di fissaggio rapido, (2 pezzi) per sistema di chiusura "comfort" AS 200/300/400

05.114.0061 O-ring per elemento di fissaggio rapido per AS 200, 1 pezzo

### ASTE DI FISSAGGIO

32.248.0002  Barre filettate, (2 pezzi) per il dispositivo di bloccaggio "standard".

32.248.0001  Barre filettate, corte, (2 pezzi) per il bloccaggio di max. 5 setacci per il dispositivo di bloccaggio "standard". 5 setacci per il dispositivo di bloccaggio "standard"

32.742.0009  Aste lisce, (2 pezzi) per sistema di chiusura "comfort" AS 200

32.742.0011  Aste lisce, corte (2 pezzi) per bloccaggio di max 5 setacci, per sistema di chiusura "comfort" AS 200

32.742.0013 Aste lisce, lunghe (2 pezzi) per sistema di chiusura universale comfort (solo per

AS 200 Control 30.032.0001)

## ACCESSORI DI SETACCIATURA

|             |                                                                                    |                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 32.365.0001 |   | Catenelle per setacci da 200 mm / 203 mm Ø a supporto della setacciatura orizzontale |
| 32.050.0001 |   | Spazzole, 3 pezzi                                                                    |
| 32.902.0001 |   | Cubi di poliuretano, 12 x 12 x 12 mm, 10 pezzi                                       |
| 32.902.0002 |   | Cubi di poliuretano, 20 x 20 x 20 mm, 10 pezzi                                       |
| 32.354.0001 |   | Sfere in gomma, 20 mm Ø, 5 pezzi                                                     |
| 32.354.0002 |  | Sfere in agata, 10 mm Ø, 10 pezzi                                                    |
| 32.354.0004 |                                                                                    | Sfere in steatite, 6 mm Ø, 150 g                                                     |

### PORTASETACCI

|             |                                                                                                                              |                                                                       |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 32.012.0001 |  | Porta Setacci a 10 posti per setacci Ø 200 mm/8", altezza 50 mm/25 mm |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|

## ACCESSORI PER SETACCI ANALITICI (FONDO DI RACCOLTA, ANELLO INTERMEDIO, COPERCHIO SETACCIO)

PER SETACCI ANALITICI 200 MM Ø, HEIGHT 50 MM

|             |                                                                                     |                    |              |          |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|---------------|
| 69.720.0050 |  | Fondo di raccolta  | acciaio inox | 200 mm Ø | altezza 50 mm |
| 69.220.0050 |  | Fondo intermedio   | acciaio inox | 200 mm Ø | altezza 50 mm |
| 69.121.0050 |  | Anello intermedio  | acciaio inox | 200 mm Ø | altezza 50 mm |
| 69.520.0051 |  | Coperchio setaccio | acciaio inox | 200 mm Ø |               |

|             |                                                                                   |                                                  |              |          |               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|
| 69.420.0050 |  | Fondo di raccolta con uscita                     | acciaio inox | 200 mm Ø | altezza 50 mm |
| 69.221.0025 |  | Anello di ventilazione per setacciatura ad umido | acciaio inox | 200 mm Ø | altezza 25 mm |
| 05.114.0174 |                                                                                   | O-ring per setacci                               |              | 200 mm Ø |               |

PER SETACCI ANALITICI 200 MM Ø, HEIGHT 25 MM

|             |                                                                                     |                                                                                         |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 69.720.0025 |    | Fondo di raccolta, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm                                |  |  |  |
| 69.220.0025 |    | Fondo intermedio, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm                                 |  |  |  |
| 69.121.0025 |    | Anello intermedio, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm                                |  |  |  |
| 69.520.0051 |   | Coperchio setaccio, acciaio inox, 200 mm Ø,                                             |  |  |  |
| 69.420.0050 |  | Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 50 mm                     |  |  |  |
| 69.221.0025 |  | Anello di ventilazione per setacciatura ad umido, acciaio inox, 200 mm Ø, altezza 25 mm |  |  |  |
| 05.114.0174 |                                                                                     | O-ring per setacci, , 200 mm Ø,                                                         |  |  |  |

PER SETACCI ANALITICI 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 2"

|             |                                                                                                            |                                                              |  |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 69.720.3050 |  | Fondo di raccolta, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"            |  |  |  |
| 69.220.3050 |  | Fondo intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"             |  |  |  |
| 69.121.3050 |  | Anello intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"            |  |  |  |
| 69.520.3051 |                  | Coperchio setaccio, acciaio inox, 8" Ø,                      |  |  |  |
| 69.420.3050 |  | Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2" |  |  |  |

69.221.3025  Anello di ventilazione per setacciatura ad umido, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

05.114.0174 O-ring per setacci, , 8" Ø,

#### PER SETACCI ANALITICI 203 MM Ø / 8" Ø, HEIGHT 1"

69.720.3025  Fondo di raccolta, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

69.220.3025  Fondo intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

69.121.3025  Anello intermedio, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

69.520.3051  Coperchio setaccio, acciaio inox, 8" Ø,

69.420.3050  Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 8" Ø, altezza 2"

69.221.3025  Anello di ventilazione per setacciatura ad umido, acciaio inox, 8" Ø, altezza 1"

05.114.0174 O-ring per setacci, , 8" Ø,

#### PER SETACCI ANALITICI 100 MM Ø

60.010.000100  Fondo di raccolta, acciaio inox, 100 mm Ø, altezza 40 mm

60.220.000100 Fondo intermedio, acciaio inox, 100 mm Ø, altezza 40 mm

60.935.000100  Anello intermedio, acciaio inox, 100 mm Ø, altezza 40 mm

60.107.000100  Coperchio setaccio, acciaio inox, 100 mm Ø,

60.010.100100  Fondo di raccolta con uscita, acciaio inox, 100 mm Ø, altezza 40 mm

05.114.0045  O-ring per setacci, , 100 mm Ø,

## SETACCI Ø 200 MM - ALTEZZA 50 MM - ISO 3310/1 - ACCIAIO

## INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

|               | # mm   | # maglia no. | Ø      | altezza | standard   |
|---------------|--------|--------------|--------|---------|------------|
| 60.131.000020 | 20 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000025 | 25 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000032 | 32 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000036 | 36 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000038 | 38 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000040 | 40 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000045 | 45 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000050 | 50 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000053 | 53 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000056 | 56 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000063 | 63 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000071 | 71 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000075 | 75 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000080 | 80 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000090 | 90 µm  | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000100 | 100 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000106 | 106 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000112 | 112 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000125 | 125 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000140 | 140 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000150 | 150 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000160 | 160 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000180 | 180 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000200 | 200 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000212 | 212 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000224 | 224 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000250 | 250 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000280 | 280 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.131.000300 | 300 µm | -            | 200 mm | 50 mm   | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.000315 | 315 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000355 | 355 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000400 | 400 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000425 | 425 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000450 | 450 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000500 | 500 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000560 | 560 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000600 | 600 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000630 | 630 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000710 | 710 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000800 | 800 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000850 | 850 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.000900 | 900 µm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001000 | 1,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001120 | 1,12 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001180 | 1,18 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001250 | 1,25 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001400 | 1,40 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001600 | 1,60 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001700 | 1,70 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.001800 | 1,80 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002000 | 2,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002240 | 2,24 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002360 | 2,36 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002500 | 2,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.002800 | 2,80 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003150 | 3,15 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003350 | 3,35 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.003550 | 3,55 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004000 | 4,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.004500 | 4,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.004750 | 4,75 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.005000 | 5,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.005600 | 5,60 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.006300 | 6,30 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.006700 | 6,70 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.007100 | 7,10 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.008000 | 8,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.009000 | 9,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.009500 | 9,50 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.010000 | 10,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.011200 | 11,20 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.012500 | 12,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.013200 | 13,20 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.014000 | 14,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.016000 | 16,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.018000 | 18,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.019000 | 19,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.020000 | 20,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.022400 | 22,40 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.025000 | 25,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.026500 | 26,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.028000 | 28,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.031500 | 31,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.035500 | 35,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.037500 | 37,50 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.040000 | 40,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.045000 | 45,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.050000 | 50,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.053000 | 53,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.056000 | 56,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.063000 | 63,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.131.071000 | 71,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.075000 | 75,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.080000 | 80,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.090000 | 90,00 mm  | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.100000 | 100,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.106000 | 106,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.112000 | 112,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |
| 60.131.125000 | 125,00 mm | - | 200 mm | 50 mm | ISO 3310/1 |

## SETACCI Ø 200 MM - ALTEZZA 25 MM - ISO 3310/1 - ACCIAIO INOSSIDABILE / MAGLIA METALLICA

|               | # mm   | # maglia no. | Ø      | altezza | standard   |
|---------------|--------|--------------|--------|---------|------------|
| 60.122.000020 | 20 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000025 | 25 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000032 | 32 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000036 | 36 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000038 | 38 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000040 | 40 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000045 | 45 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000050 | 50 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000053 | 53 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000056 | 56 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000063 | 63 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000071 | 71 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000075 | 75 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000080 | 80 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000090 | 90 µm  | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000100 | 100 µm | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000106 | 106 µm | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000112 | 112 µm | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |
| 60.122.000125 | 125 µm | -            | 200 mm | 25 mm   | ISO 3310/1 |

|               |         |   |        |       |            |
|---------------|---------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.000140 | 140 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000150 | 150 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000160 | 160 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000180 | 180 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000200 | 200 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000212 | 212 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000224 | 224 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000250 | 250 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000280 | 280 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000300 | 300 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000315 | 315 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000355 | 355 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000400 | 400 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000425 | 425 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000450 | 450 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000500 | 500 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000560 | 560 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000600 | 600 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000630 | 630 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000710 | 710 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000800 | 800 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000850 | 850 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.000900 | 900 µm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001000 | 1,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001120 | 1,12 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001180 | 1,18 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001250 | 1,25 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001400 | 1,40 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001600 | 1,60 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001700 | 1,70 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.001800 | 1,80 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

|               |          |   |        |       |            |
|---------------|----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.002000 | 2,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002240 | 2,24 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002360 | 2,36 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002500 | 2,50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.002800 | 2,80 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003150 | 3,15 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003350 | 3,35 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.003550 | 3,55 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004000 | 4,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004500 | 4,50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.004750 | 4,75 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.005000 | 5,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.005600 | 5,60 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.006300 | 6,30 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.006700 | 6,70 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.007100 | 7,10 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.008000 | 8,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.009000 | 9,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.009500 | 9,50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.010000 | 10,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.011200 | 11,20 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.012500 | 12,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.013200 | 13,20 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.014000 | 14,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.016000 | 16,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.018000 | 18,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.019000 | 19,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.020000 | 20,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.022400 | 22,40 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.025000 | 25,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.026500 | 26,50 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |

|               |           |   |        |       |            |
|---------------|-----------|---|--------|-------|------------|
| 60.122.028000 | 28,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.031500 | 31,50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.035500 | 35,50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.037500 | 37,50 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.040000 | 40,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.045000 | 45,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.050000 | 50,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.053000 | 53,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.056000 | 56,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.063000 | 63,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.071000 | 71,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.075000 | 75,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.080000 | 80,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.090000 | 90,00 mm  | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.100000 | 100,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.106000 | 106,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.112000 | 112,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |
| 60.122.125000 | 125,00 mm | - | 200 mm | 25 mm | ISO 3310/1 |