



VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100

Vibrační podavač DR 100 se používá na **rovnoměrné, kontinuální podávání a přepravu** tekutých sypkých materiálů a jemných prášků. DR 100 se používá v kombinaci s mlýny RETSCH, děliči vzorků a zařízeními pro měření částic a je také vhodný pro další podávací úkoly. Jeho výkon, přizpůsobivost a kompaktní design dělá tento přístroj vhodným pro **velkou škálu použití**. DR 100 může být **řízen a kontrolován externě** přes vestavěné rozhraní. RETSCH vibrační podavače zaručují **reprodukovatelně přesné výsledky** a maximalizují účinnost následných laboratorních a testovacích zařízení.

VÝHODY PRODUKTU


- | silný pohon pro plynulý přísun materiálu
- | nastavitelný objemový průtok a vrstva materiálu
- | digitální nastavení rychlosti
- | možná obsluha přes interface
- | digitální nastavení času
- | kompaktní kontrolní a podávací zařízení
- | snadné čištění push-fit žlabu
- | široký sortiment příslušenství včetně různých žlabů

PŘÍKLADY APLIKACÍ

cementářský slínek, chemikálie, hnojiva, kovové prášky, káva, minerály, mouky, obilí, ořechy, plniva, prací prášek, písek, půda, semena, stavební materiály, ...

PRINCIP FUNKCE

Podávaný materiál prochází trychtýřem na přepravní žlábek. Tento žlábek je poháněn elektromagnetickým nabíjecím vibrátorem s frekvencí 50 Hz (popř. 60 Hz). Nastavení objemu podávaného materiálu je plynule nastavitelné. Výška úrovně trychtýře se dá nastavit podle produktu a potřeby. Vibrační podavač DR 100 lze externě ovládat přes rozhraní. Tak lze například automaticky uzpůsobit přísun materiálu do ultraodstředivého mlýnu ZM 200 podle kapacity mletí. Kompaktní, bezúdržbovou jednotku vibračního podavače DR 100 lze jednoduše kombinovat s jinými laboratorními přístroji anebo integrovat do sestav laboratorních přístrojů.

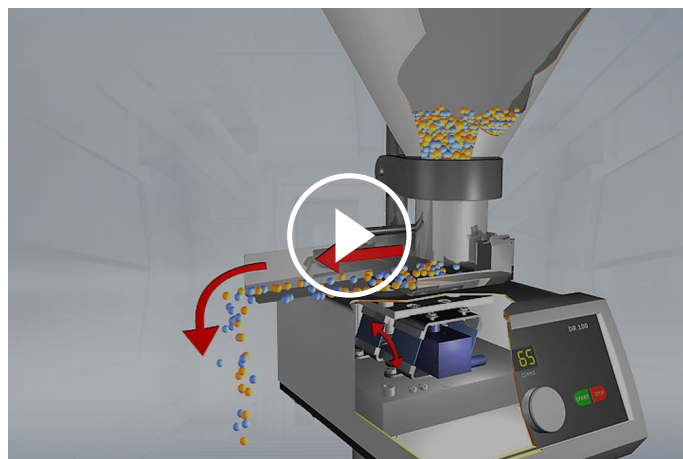

[Kliknutím zobrazíte video](#)

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikace	plnění, doprava
Oblast použití	biologie, chemie / plasty, geologie / metalurgie, medicína / farmaceutika, potraviny, sklo / keramika, stavební materiály, strojírenství / elektronika, zemědělství, životní prostředí / recyklace
Vstupní materiál	odlévatelné sypké materiály
Vstupní velikost materiálu*	< 2 mm (15 mm žlábek) < 6 mm (40 mm žlábek) < 12 mm (75 mm žlábek)
Objemový průtok	
Nastavení času	digitální, 1 - 99 min / nepřetržitý provoz
Nastavení rychlosti	digitální, 1 - 99 / 0 - 5 l/min, plynule nastavitelné
Šířka propusti	15 mm / 40 mm / 75 mm / 75/40 mm
Délka propusti	210 mm
Obsah trychtýře	2.8 l (15 mm žlábek) 2.8 l (40 mm žlábek) 3.5 l (75 mm žlábek) 3.5 l (75/40 mm žlábek)
Elektrické napájení	různé napětí
Připojení k elektrické síti	1-fázové
Š x V x H	260 x 420 x 280 mm
Váha netto	9,7 kg
Normy	CE

*v závislosti na vstupním materiálu a nastavení zařízení/nastavení

www.retsch.com/dr100

OBJEDNACÍ DATA A ŽÁDOST

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100 SAMOSTATNÉ KOMPONENTY

DR 100 POHONNÁ JEDNOTKA (DÁVKOVACÍ SADU OBJEDNÁVEJTE, PROSÍM, SAMOSTATNĚ)

70.938.0001		DR 100 pohonná jednotka	220–240 V, 50 Hz
-------------	---	-------------------------------	---------------------

70.938.0002		DR 100 pohonná jednotka	110–120 V, 60 Hz
-------------	---	-------------------------------	---------------------

DÁVKOVACÍ SADY PRO DR 100

72.020.0009	Dávkovací sady	(nasazovací podávací žlábek 15 mm, držák, násypka 2.8 l a příslušenství)
72.020.0010	Dávkovací sady	(nasazovací podávací žlábek 40 mm, držák, násypka 32.8 l a uchycení)
72.020.0011	Dávkovací sady	(nasazovací podávací žlábek 75 mm, držák, násypka 3.5 l a uchycení)
72.020.0017	Dávkovací sady	(zasunovací podávací žlábek 75 mm, držák, násypka 22 litrů a uchycení)
72.020.0012	Dávkovací sady	(nasazovací podávací žlábek 75/40 mm, držák, násypka 3.5 l a uchycení)

NASAZOVACÍ ŽLÁBEK PRO DR 100 O DÉLCE 210 MM

03.729.0035		Nasazovací podávací žlábek	nerezová ocel	šířka 15 mm	pro držák 15/40
03.729.0036		Nasazovací podávací žlábek	nerezová ocel	šířka 40 mm	pro držák 15/40
03.729.0037		Nasazovací podávací žlábek	nerezová ocel	šířka 75 mm	pro držák 75
03.729.0040		Nasazovací podávací žlábek	nerezová ocel	šířka 75/40 mm	pro držák 75

03.729.0039		Nasazovací podávací žlábek	nerezová ocel	V-tvar	pro držák 15/40
-------------	---	----------------------------	---------------	--------	-----------------

DRŽÁKY PRO NASAZOVACÍ ŽLÁBKY PRO DR 100

03.018.0007		Držák 15/40	pro nasazovací podávací žlábek 15 mm, 40 mm a V-tvar		
03.018.0008		Držák 75	pro nasazovací podávací žlábek 75 mm		

NÁSYPKY DR 100

03.785.0146		Násepka	2.8 litrů	nerezová ocel	pro žlábků 15 a 40 mm
02.785.0019		Násepka	3.5 litrů	nerezová ocel	pro žlábků 75 a 75/40 mm
02.785.0251		Násepka	22 litrů	nerezová ocel	pro žlábků 75
03.785.0151		Násepka	0.4 litrů	nerezová ocel	pro žlábků 15 a 40 mm
03.785.0159		Násepka	2.8 litrů	nerezová ocel	pro V-žlábek

UPÍNAČ NÁSYPKY K DR 100

02.266.0259		Držák na násepku 0.4 litru a 2.8 litru			
02.266.0260		Uchycení pro násepku 3,5 litrů a 22 litrů			

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100 PRO ZM 300

DR 100 pohonná jednotka (dávkovací sadu objednávejte, prosím, samostatně)

70.938.0001		DR 100 pohonná jednotka	220–240 V, 50 Hz
70.938.0002		DR 100 pohonná	110–120 V, 60 Hz

jednotka

72.020.0018 Podávací sada DR 100-75/40 pro ZM 300, včetně nasazovacího podávacího žlabu 75/40 mm, délka 250 mm, držáku pro nasazovací podávací žlab, násypky 3,5 litru a uchycení násypky, stojanu s datovým kabelem.

NASAZOVACÍ PODÁVACÍ ŽLAB PRO DR 100 PRO ZM 300

03.729.0054  Nasazovací podávací žlábek, nerezová ocel, šířka 40 mm, délka 250 mm

03.729.0056  Nasazovací podávací žlábek, nerezová ocel, šířka 75/40 mm, délka 250 mm

03.729.0055  Nasazovací podávací žlábek, nerezová ocel, V-tvar, šířka 40 mm, délka 250 mm

Držáky pro nasazovací žlábků viz výše

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100 PRO SR 300/SK 300

DR 100 pohonná jednotka (dávkovací sadu objednávejte, prosím, samostatně)

70.938.0001  DR 100 pohonná jednotka 220–240 V, 50 Hz

70.938.0003  DR 100 pohonná jednotka 220–240 V, 60 Hz

70.938.0010  DR 100 pohonná jednotka 200 V, 50 Hz

70.938.0006  DR 100 pohonná jednotka 200 V, 60 Hz

72.020.0019 Podávací sada DR 100/3,5 litru pro SR 300/SK 300, včetně nasazovacího podávacího žlabu 75 mm, držáku pro nasazovací podávací žlab, násypky 3,5 litru a držáku pro násypku a uchycení

72.020.0020 Podávací souprava DR 100/22 litrů pro SR 300/SK 300, včetně nasazovacího žlabu 75 mm, držáku pro nasazovací žlab, násypky 22 litrů a držáku pro násypku a uchycení

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100 PRO PT 100

DR 100 pohonná jednotka (dávkový sadu objednávejte, prosím, samostatně)

70.938.0001		DR 100 pohonná jednotka	220–240 V, 50 Hz
70.938.0002		DR 100 pohonná jednotka	110–120 V, 60 Hz
72.020.0021	Podávací sada DR 100-75/40 pro PT 100, včetně nasazovacího podávacího žlabu 75/40 mm, držáku pro nasazovací podávací žlab, násypka 3,5 litru, uchycení pro násypku a stojan s datovým kabelem.		

VIBRAČNÍ PODAVAČ DR 100 PT 200

DR 100 pohonná jednotka (dávkový sadu objednávejte, prosím, samostatně)

70.938.0001		DR 100 pohonná jednotka	220–240 V, 50 Hz
70.938.0002		DR 100 pohonná jednotka	110–120 V, 60 Hz
72.020.0022	Podávací sada DR 100/3,5 litru pro PT 200, včetně nasazovacího podávacího žlabu 75 mm, držáku nasazovacího podávacího žlabu, nádoby 3,5 litru, držáku pro násypku a datového kabelu.		
72.020.0023	Podávací sada DR 100/22 litrů pro PT 200, včetně nasazovacího podávacího žlabu 75 mm, držáku pro nasazovací podávací žlab, nádoba 22 litrů, uchycení pro násypku a datový kabel.		