



Robustní design se snoubí s jemnými částicemi

Kladívkové mlýny se používají k drcení, rozměňování a deaglomeraci středně tvrdých, tvrdých, křehkých, houževnatých a vláknitých vzorků.

Robustní kladívkový mlýn RETSCH HM 200 přijímá velké velikosti vstupního materiálu až do 100 mm,

které lze v závislosti na vlastnostech vzorku zmenšit na méně než 0,8 mm.

Mlýnek je ideální pro zpracování velkých objemů vzorků dávkově nebo kontinuálně, což zajišťuje vysokou průchodnost vzorků. Díky vlastnostem, jako je robustní konstrukce, snadná manipulace a rychlé čištění, je mlýnek HM 200 stejně vhodný pro použití v laboratořích nebo pilotních provozech.




[Kliknutím zobrazíte video](#)

KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

VYSOKÝ VÝKON A DEFINOVANÁ KONEČNÁ JEMNOST

Tento diagram ukazuje srovnání kladívkového mlýna HM 200 se dvěma rotorovými mlýny. Je zde jasně patrná extrémně vysoká průchodnost vzorků u mlýnku HM 200. HM 200 vykazuje dobrou účinnost drcení 125, což je hodnota maximální velikosti vstupního materiálu dělená nejjemnější dosažitelnou velikostí mletí. Modely SR 300 a SK 300 přijímají maximální velikost vstupního materiálu 25 mm (na rozdíl od HM 200, který přijímá velikosti až 100 mm) a drtí částice na velikost pod 0,05 mm, resp. 0,1 mm - výsledkem je vyšší účinnost mletí.

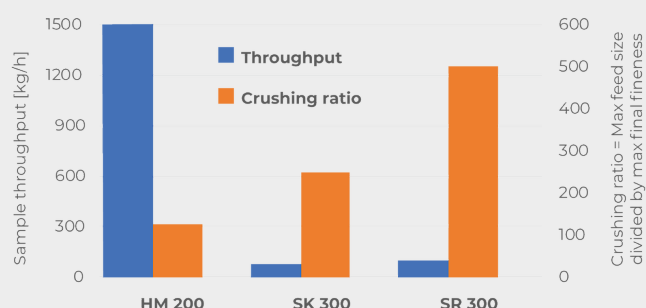

- | Vynikající drticí výkon
- | Velmi vysoká propustnost vzorků až 1500 kg/h
- | Pevné otáčky 3000 min⁻¹
- | Rozsah sít od 2 - 40 mm
- | Vstupní velikost až 100 mm, velikost mletí < 0,8 mm
- | Snadný přístup do drticí komory usnadňuje čištění
- | Pro dávkové nebo kontinuální mletí
- | Konektor pro odsávání prachu

KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

UŽIVATELSKÉ POHODLÍ V KOMBINACI S MAXIMÁLNÍ BEZPEČNOSTÍ

Snadné čištění rotoru a kladívek díky

- | Sklopná násypka pro přístup do drtící komory shora.
- | Přídavná možnost sklopení střední části stroje s rotorem a kladívky, která umožňuje snadné čištění rotoru a kladívek zespodu.

Pro zajištění dlouhé životnosti kladívkového mlýna HM 200, i když je většinou používán pro náročné drcení, může uživatel vyměnit následující díly:


- | Třecí desky uvnitř mlýna
- | Rotor s výkyvnými kladívky

Bezpečnostní spínač a brzdový motor zajišťují okamžité zastavení jednotky, např. při nechtěném otevření dvířek.



DEFINOVANÁ VELIKOST ČÁSTIC DÍKY RŮZNÝM SÍTŮM

Dosažitelná konečná jemnost materiálu vzorku závisí na vlastnostech vzorku. Tvrdé a křehké vzorky lze v HM 200 snadno rozdrtit na velikost částic pod 0,8 mm. Řada sít s velikostí otvorů od 2 mm do 40 mm umožňuje dokonalé přizpůsobení požadavkům aplikace.

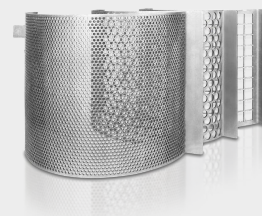

Tvrdé, vláknité nebo vlhké vzorky, jako jsou plastové hračky, dřevo nebo vlhké uhlí, lze v kladívkovém mlýně úspěšně drtit při použití síta se střední až velkou velikostí otvorů.

CYKLONOVÝ SYSTÉM

SBOHEM PRACHU A ZTRÁTÁM VZORKŮ

Ať už připravujete vzorky v oblasti těžby, drahých kovů, výzkumu materiálů nebo analýzy životního prostředí, cyklonový systém RETSCH zajišťuje účinnost, přesnost a bezpečnost jako nikdy předtím!

Proč byste si měli vybrat cyklonový systém RETSCH?

| Celková výtěžnost vzorku

Eliminujte ztráty vzorku při drcení pomocí našeho cyklonu, čímž zajistíte přesné a reprodukovatelné výsledky každé analýzy!

| Zvýšená bezpečnost obsluhy

Náš cyklon výrazně snižuje prašnost a vytváří bezpečnější a čistší pracovní prostředí pro váš tým!

Navíc: Stávající přístroje lze dovybavit cyklonovým systémem



KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

NÁSYPKY A SBĚRNÉ SYSTÉMY

Kladívkový mlýn HM 200 je vhodný pro dávkové i kontinuální mletí a může být vybaven různými násypky a sběrnými systémy.

- | Standardní násypka pro rychlé a snadné podávání velkého množství vzorků
- | Násypka pro dlouhé materiály je výhodná pro podávání podlouhlých vzorků
- | Standardní sběrač pro redukci velikosti vzorku do 10 l
- | Pro velké objemy je k dispozici sběrač o objemu až 30 l.
- | Nepřetržitý provoz: Použijte kontinuální gravitační výstup a sběrný systém podle přání zákazníka.



**Násypka pro
dlouhé materiály**



**Sběrná nádoba
10 l**



**Sběrná nádoba
30 l**



**Gravitační výstup
pro nepřetržitý
provoz**

KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

TYPICKÉ VZORKY MATERIÁLU

Vysoce výkonné kladívkové drtiče společnosti RETSCH se výborně hodí k předběžnému drcení a jemnému mletí rud, minerálů, keramiky, křemene, strusky, zeminy, uhlí, skla, cementového slínku, dřeva, plastů, krmných pelet, suchého krmiva a sušených léčivých bylin.



sklo



uhlí



krmivo pro zvěř




byliny

Nejllepší řešení pro Vaší přípravu vzorků najdete v naší aplikační databázi

KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

PRINCIP FUNKCE

Do mlecí komory kladívkového mlýna se vzorek přivádí násypkou. Mlýnek HM 200 je vybaven vodorovným rotačním hřídelí, na kterém je namontováno 10 volně výkyvných kladívek. Tato kladívka drtí materiál vysokou rychlostí uvnitř mlecí komory. Díky výkyvným kladívkům je na rozdíl od pevných kladív minimalizováno riziko zablokování stroje i opotřebení. Materiál je drcen nárazem při úderu každého kladívka a při odrazu uvnitř mlecí komory. Jakmile je vzorek dostatečně jemný, aby prošel sítí, padá gravitačním vývodem do sběrné nádoby.

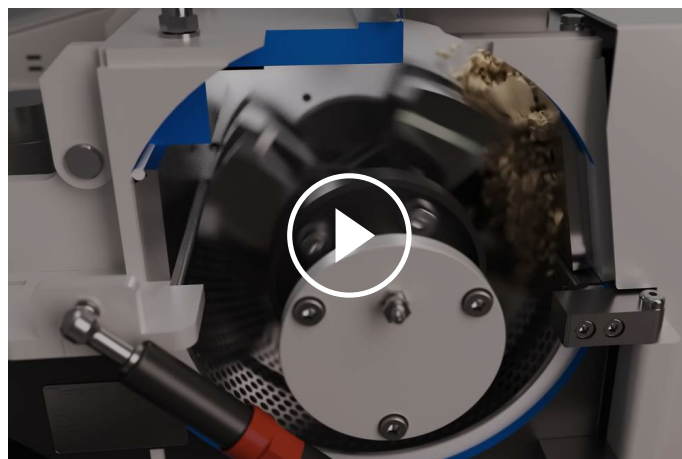

[Kliknutím zobrazíte video](#)

KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikace	hrubé a předběžné drcení, desaglomerace
Oblast použití	chemie / plasty, geologie / metalurgie, potraviny / krmiva, sklo / keramika, stavební materiály, strojírenství / elektronika, uhlí, zemědělství, životní prostředí / recyklace
Vstupní materiál	středně tvrdý, tvrdý, křehký, houževnatý, vláknitý
Princip redukce velikosti zrna	náraz, stříh
Vstupní velikost materiálu*	< 100 mm
Konečná jemnost*	< 0.8 mm
Velikost dávky / vstupní množství*	až 30 l v závislosti na sběrné nádobě
Rychlost při 50 Hz (60 Hz)	3000 min ⁻¹ (3500 min ⁻¹)
Propustnost*	1500 kg/h
Obvodová rychlost rotoru	31.4 m/s
Průměr rotoru	200 mm
Druhy rotorů	10 kyvných kladívek
Suché mletí	ano
Mletí za mokra	-
Kryogenní mletí	-
Materiál mlecích nástrojů	kalená ocel 1.0503 (kladívka); ocel 1.0330 (síta)
Rozměry sít	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 40 mm
Odsávací prachu	ano
Verze výrobní linky	ano
Objem sběrné nádoby	10 l, 30 l, kontinuální výstup
Pohon	Třífázový motor
Síla pohonu	1.5 kW
Elektrické napájení	různé napětí
Připojení k elektrické síti	3-fázové
Kód ochrany	IP 54
Š x V x H zavřený	700 x 1570 x 750 mm
Váha netto	~ 150 kg
Normy	CE

*v závislosti na vstupním materiálu a nastavení zařízení/nastavení

www.retsch.com/hm200

OBJEDNACÍ DATA A ŽÁDOST

KLADÍVKOVÝ MLÝN HM 200

Kladívkový mlýn včetně rotoru s kyvnými kladívky, třecími deskami a 10 l záchytnou nádobou (násypku a spodní síto objednávejte, prosím, zvlášť)

21.753.0001  HM 200 3~ 400 V, 50 Hz

21.753.0002  HM 200 3~ 200-220 V, 60 Hz

verze s jiným napětím jsou k dispozici za stejnou cenu na požádání

NÁSYPKA

23.785.0031 Násypka na dlouhé materiály pro HM 200

23.785.0032 Standardní násypka

SPODNÍ SÍTA HM 200, OCEL

03.647.0563 Lichoběžníkové 0.50 mm
otvory

03.647.0564 Lichoběžníkové 1.00 mm
otvory

03.647.0592 Lichoběžníkové 1.50 mm
otvory

03.647.0565 Kruhové otvory 2.00 mm

03.647.0566 Kruhové otvory 3.00 mm

03.647.0567 Kruhové otvory 4.00 mm

03.647.0568 Kruhové otvory 5.00 mm

03.647.0569 Kruhové otvory 6.00 mm

03.647.0570 Kruhové otvory 8.00 mm

03.647.0571 Kruhové otvory 10.00 mm

03.647.0572 Čtvercové 15.00 mm
otvory

03.647.0573 Čtvercové 40.00 mm

otvory

CYKLON PRO HM 200

CYCLONE SET WITH HOLDER, CONNECTING ELEMENT, LID WITH CONNECTOR FOR VACUUM CLEANER AND SAMPLE OUTLET
(PLEASE ORDER CASSETTE WITH OUTLET SEPERATELY)

22.935.0039	Cyklonová sada se sběrnou nádobou 30 l
03.183.0138	Kazeta s vývodem pro použití s cyklonem
02.605.0420	Nastavitelné ocelové spojovací potrubí (316L) pro cyklónovou sadu
05.707.0208	Hadice s certifikací FDA, 1,5 m
22.748.0017	Průmyslový vysavač Attix, 230 V, 50/60 Hz

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HM 200

23.003.0039	Záchytná nádoba, 10 litrů, nerezová ocel
23.003.0038	Záchytná nádoba, 30 litrů, nerezová ocel
23.003.0037	Výstup pro nepřetržitý provoz
22.786.0036	Konverzní sada pro nepřetržitý provoz, včetně standardní násypky, výstupu pro nepřetržitý provoz, záchytné nádoby, 30 litrů, nerezová ocel
22.748.0017	Průmyslový vysavač, 230 V, 50/60 Hz, včetně adaptéru (další elektrické verze a náhradní filtrační sáčky jsou k dispozici na vyžádání)
23.711.0035	Třecí desky, kalená ocel
22.002.0028	Rotor včetně kyvných kladívek