




СИТОВА МАШИНА AS 450 BASIC

This sieve shaker covers a size range from 25 µm to 125 mm and accepts loads of up to 15 kg. Time and amplitude are digitally set which ensures reproducibility of the sieving process

The AS 450 basic is suitable for dry and wet sieving. It is the economic solution for users who need to sieve larger quantities of dry material with reliable results.

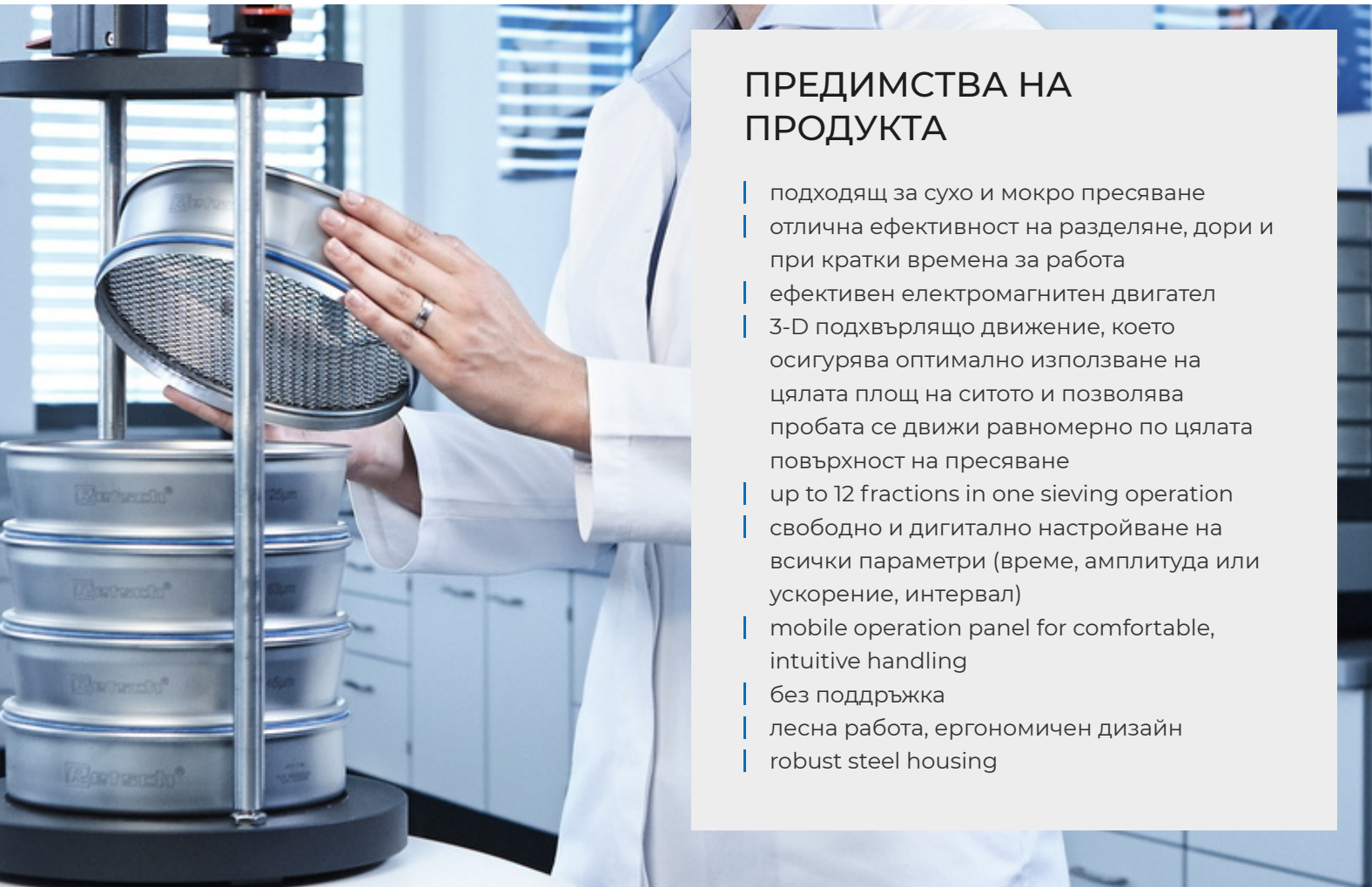

ПРЕДИМСТВА НА ПРОДУКТА

- | подходящ за сухо и мокро пресяване
- | отлична ефективност на разделяне, дори и при кратки времена за работа
- | ефективен електромагнитен двигател
- | 3-D подхвърлящо движение, което осигурява оптимално използване на цялата площ на ситото и позволява пробата се движи равномерно по цялата повърхност на пресяване
- | up to 12 fractions in one sieving operation
- | свободно и дигитално настройване на всички параметри (време, амплитуда или ускорение, интервал)
- | mobile operation panel for comfortable, intuitive handling
- | без поддръжка
- | лесна работа, ергономичен дизайн
- | robust steel housing

WET SIEVING WITH VIBRATORY SIEVE SHAKERS

There are many applications for which wet sieving is the best solution, e.g. when the material to be tested is a suspension or when a very fine sample ($< 45 \mu\text{m}$) that tends to agglomerate needs to be sieved. All vibratory sieve shakers from RETSCH can be used for wet sieving. There are special accessories like clamping lids with spray nozzle and collecting pans with outlet available. By placing RETSCH's venting rings between the sieves, air cushions can expand without letting liquid or sample material escape.



СИТОВА МАШИНА AS 200 CONTROL

АКСЕСОАРИ И ОПЦИИ

RETSCH sieve shakers can be equipped with a variety of accessories to meet a wide range of application requirements.



Затягащи устройства

Със затягащите устройства RETSCH ситата се захващат безопасно, бързо и удобно на сито. Затягащите устройства „комфорт“ са особено лесни за ползване и спестяват време.

Аксесоари за сита

Съдове за събиране, междинни тигани, междинни пръстени и капаци на ситото

Аксесоари за мокро сеене

Затягащ капак с дюза, събирателни съдове с изход, обезвъздушаващи пръстени.

IQ/OQ Documents

We provide IQ/OQ documentation for the „control“ sieve shakers to support IQ/OQ certification by our customers.

Делители на проби

Значими резултати могат да бъдат получени само ако пробата представлява оригиналния материал. Разделителите на проби произвеждат представителни частични проби, като по този начин осигуряват възпроизводимостта на анализа.

Ultrasonic baths and dryers

Suitable for thorough cleaning of test sieves and for quick, gentle drying of samples and sieves.


Пресяващи помощни средства

Верижни пръстени, четки, кубчета, топки (например за намаляване на агломерациите при пресяване на частици <100 µm и поддържане на мрежата свободна).

RETSCH TEST SIEVES AND ACCESSORIES - ENGINEERED FOR SUPERIOR PERFORMANCE

EASYSIEVE / EASYSIEVE CFR СОФТУЕР ЗА ОЦЕНКА

EasySieve, the software for particle size analyses, exceeds manual evaluation in many aspects. The software is able to automatically control the necessary measurement and weighing procedures – from the registration of the weight of the sieve up to the evaluation of the data. It is simple and convenient to use and is also available in an FDA 21 CFR Part 11-conform version.

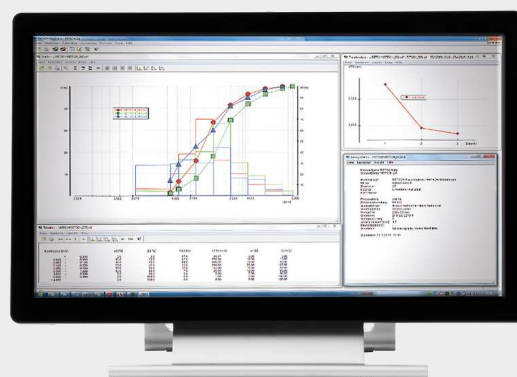

СИТОВА МАШИНА AS 450 BASIC

ТИПИЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОБА

RETSCH's vibratory sieve shakers are ideally suited for separation, fractioning and particle size determination of cement clinker, chemicals, coal, coke, construction materials, fillers, minerals, ores, plastics, sand and soils.



торове



почва



зърнени храни



строителни материали

To find the best solution for your sample preparation task, visit our application database.

ПРИНЦИП НА РАБОТА

AS 450 basic работи посредством електромагнитен мотор. Той създава 3D подхвърлящо движение, което разпределя продукта равномерно по цялата повърхност на пресяване. Предимство: висок капацитет, изключително гладка работа, кратки времена за пресяване и висока ефективност на отделяне.



[Click to view video](#)

СИТОВА МАШИНА AS 450 BASIC

TECHNICAL DATA

Приложения	разделяне, фракциониране, определянето на размера на частиците
Област на приложение	Химия / пластмаси, геология / металургията, околна среда / рециклиране, строителни материали / електроника, стъкло / керамика
Материали	прахове, насипни материали
Обхват на измерване*	25 микрона - 125 мм
Пресяващо движение	подхвърлящо движение под ъгъл - 3D движение
Макс. капацитет	15 кг
Макс. брой на фракциите	12 / 8*
Макс. тегло на стека сита	50 кг
Изобразяване на амплитуда	digital, 1 - 100% in 10 steps (0 - 2 mm)
Дисплей за времето на пресяване	digital, 0 - 99 min
прекъсната работа	да
Запаметяване на настройки	1
Подходящ за сухо пресяване	да
Подходящ за мокро пресяване	да
Връзка с компютър	не
Диаметри на ситата	400 мм / 450 мм
Макс. височина на стека сита	830 мм
Захващащи устройства	standard (two models, one for dry, one for wet sieving)
Данни за електрозахранването	различни напрежения
Захранване	еднофазово
Ш x В x Д	680 x 280 x 680 мм
Нетно тегло	~ 112 kg
Стандарти	CE

depending on sieve height and clamping unit

www.retsch.com/as450basic

ДАННИ ПОРЪЧКА

VIBRATORY SIEVE SHAKERS AS 450

Vibratory Sieve Shakers AS 450 for test sieves up to 450 mm / 18" Ø
(please order clamping device, test sieves and collecting pan separately)

30.029.0001



AS 450 basic

230 V, 50 Hz

other electrical versions available for the same price

CLAMPING DEVICES AS 450

AS 450 BASIC

32.662.0020



Clamping device "standard", for test sieves 400/450 mm Ø

32.662.0033

Wet sieving clamping device "standard", for test sieves 400/450 mm Ø

SIEVE STACKS AS 450

60.166.000998

Sieve stack consisting of 10 test sieves (ISO 3310-1), 400 mm Ø, 65 mm height (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 16 mm, 31.5 mm) and collecting pan

60.168.000999

Sieve stack consisting of 7 test sieves (ISO 3310-1), 450 mm Ø, 100 mm height (63 µm, 125 µm, 250 µm, 500 µm, 1 mm, 2 mm, 4 mm) and collecting pan

60.167.000998

Sieve stack consisting of 10 test sieves (ASTM E11), 400 mm Ø, 65 mm height, (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh, 5/16", 5/8", 1.1/4") and collecting pan

60.169.000999

Sieve stack consisting of 7 test sieves (ASTM E11), 450 mm Ø, 100 mm height (230 mesh, 120 mesh, 60 mesh, 35 mesh, 18 mesh, 10 mesh, 5 mesh) and collecting pan

ACCESSORIES FOR TEST SIEVES (PANS, RINGS, LIDS)

FOR TEST SIEVES 400 MM Ø

60.010.000400



Collecting pan, неръждаема стомана, 400 mm Ø, height 65 mm

60.220.000400		Intermediate pan, неръждаема стомана, 400 mm Ø, height 65 mm
60.935.000400		Intermediate ring, неръждаема стомана, 400 mm Ø, height 65 mm
60.107.000400		Sieve lid, неръждаема стомана, 400 mm Ø,
05.114.0048		O-ring for test sieves, , 400 mm Ø,

FOR TEST SIEVES 450 MM Ø

60.010.000450		Collecting pan, неръждаема стомана, 450 mm Ø, height 50 mm
60.220.000450		Intermediate pan, неръждаема стомана, 450 mm Ø, height 100 mm
60.935.000450		Intermediate ring, неръждаема стомана, 450 mm Ø, height 100 mm
69.545.0050		Sieve lid, неръждаема стомана, 450 mm Ø,
05.114.0012		O-ring for test sieves, , 450 mm Ø,

TEST SIEVES Ø 450 MM - 100 MM HEIGHT - ISO 3310/1 - STAINLESS STEEL /WIRE GAUZE

	# mm	# mesh no.	Ø	height	standard
60.168.000036	36 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000038	38 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000040	40 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000045	45 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000050	50 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000053	53 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000056	56 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000063	63 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1

60.168.000071	71 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000075	75 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000080	80 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000090	90 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000100	100 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000106	106 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000112	112 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000125	125 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000140	140 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000150	150 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000160	160 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000180	180 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000200	200 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000212	212 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000224	224 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000250	250 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000280	280 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000300	300 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000315	315 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000355	355 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000400	400 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000425	425 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000450	450 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000500	500 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000560	560 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000600	600 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000630	630 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000710	710 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000800	800 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000850	850 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.000900	900 µm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1

60.168.001000	1.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001120	1.12 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001180	1.18 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001250	1.25 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001400	1.40 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001600	1.60 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001700	1.70 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.001800	1.80 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.002000	2.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.002240	2.24 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.002360	2.36 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.002500	2.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.002800	2.80 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.003150	3.15 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.003350	3.35 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.003550	3.55 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.004000	4.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.004500	4.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.004750	4.75 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.005000	5.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.005600	5.60 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.006300	6.30 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.006700	6.70 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.007100	7.10 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.008000	8.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.009000	9.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.009500	9.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.010000	10.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.011200	11.20 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.012500	12.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.013200	13.20 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1

60.168.014000	14.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.016000	16.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.018000	18.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.019000	19.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.020000	20.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.022400	22.40 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.025000	25.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.026500	26.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.028000	28.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.031500	31.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.035500	35.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.037500	37.50 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.040000	40.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.045000	45.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.050000	50.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.053000	53.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.056000	56.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.063000	63.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.071000	71.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.075000	75.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.080000	80.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.090000	90.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.100000	100.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.106000	106.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.112000	112.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1
60.168.125000	125.00 mm	-	450 mm	100 mm	ISO 3310/1